




w wellion[®]

COVID-19 PRODUKTE

COVID-19 PRODUCTS

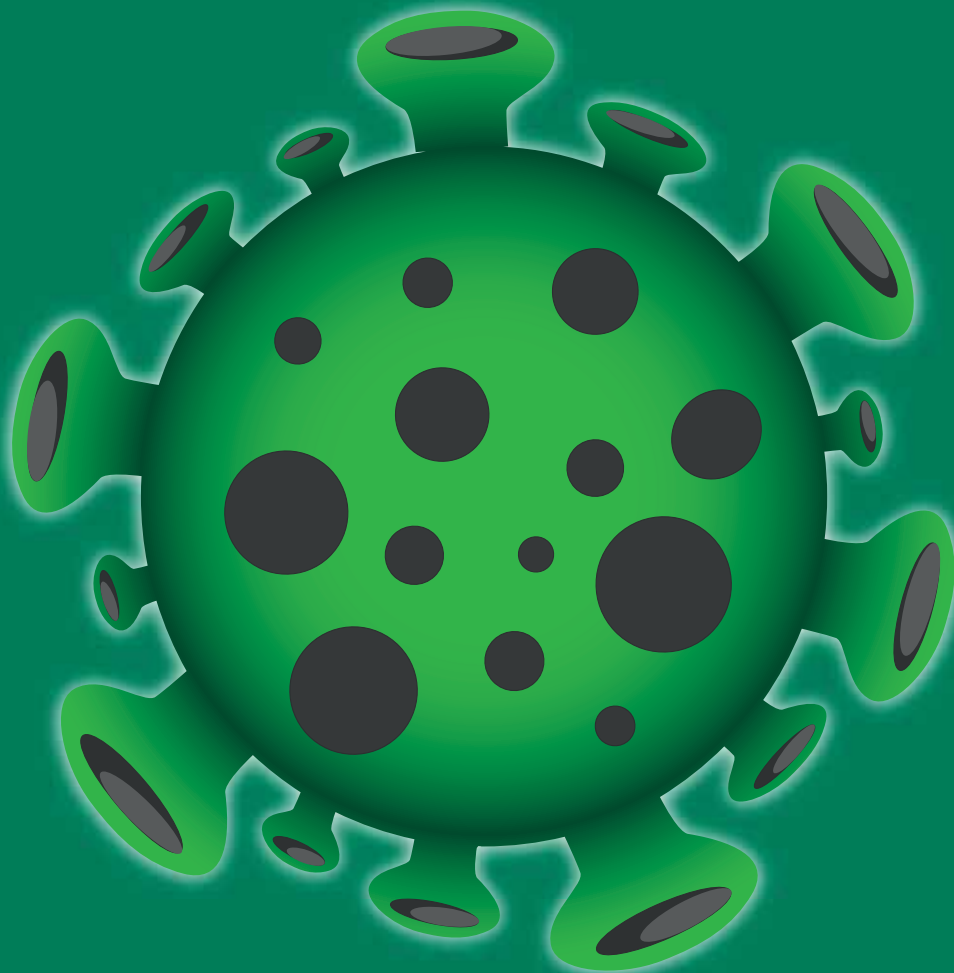

Your
AUSTRIAN
health brand



Ihre
ÖSTERREICHISCHE
Gesundheitsmarke

SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest

SARS-CoV-2 Antigen Rapid test

Spezifikationen / Specifications:

Testprinzip:	chromatographischer Immunoassay
<i>Test principle:</i>	<i>chromatographic immunoassay</i>
Probentyp:	Nasalabstrich, Rachenabstrich, Nasen / Rachenabstrich
<i>Specimen type:</i>	<i>Nasal, Oropharyngeal, Nasopharyngeal</i>
Probenvolumen / <i>Sample size:</i>	60 µl
Testzeit / <i>Testing time:</i>	15 Minuten / <i>minutes</i>
Umgebungstemperatur / <i>surrounding temperature:</i>	15-30°C
Lagertemperatur / <i>storage temperature:</i>	2-30°C
Haltbarkeit / <i>shelf life:</i>	24 Monate / <i>months</i>
Spezifität / <i>specificity:</i>	100%
Sensitivität / <i>sensitivity:</i>	95,04%
Klinische Genauigkeit / <i>clinical accuracy:</i>	98,91%
Packungsgröße / <i>Package size:</i>	25 Tests / <i>25 tests</i>

Durchführung des Tests / Test procedure

1. Probennahme / Specimen collection:



Nasalabstrich
Nasal






Rachenabstrich
Oropharyngeal




Nasen/Rachenabstrich
Nasopharyngeal

2. Vorbereitung der Probe / Specimen preparation:

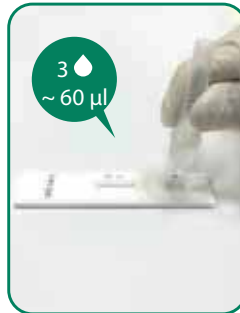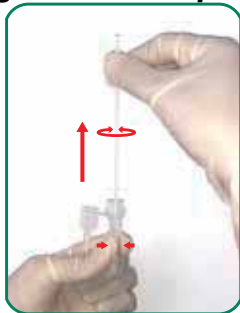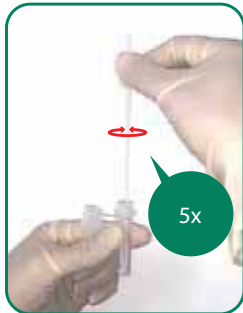

Interpretation der Ergebnisse / Interpretation of test result

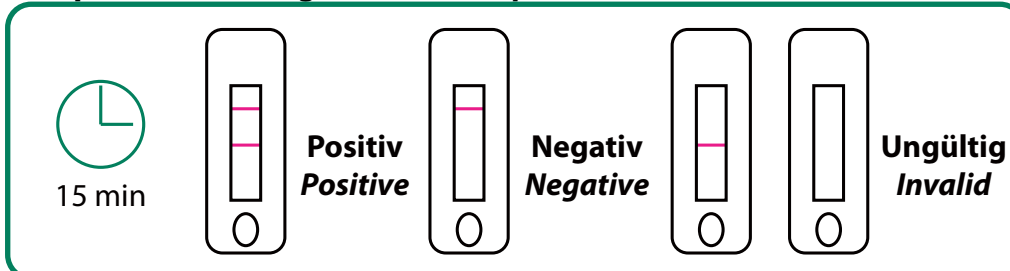

	Inhalt / Content	Art.Nr. / Art. No.	PhzNr AT
Wellion SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest <i>Wellion SARS-CoV-2 Antigen Rapid test</i>	25 Stk / 25ct	VCD05-01-01	5414462


SARS-CoV-2 IgM/IgG Antikörper Schnelltest

SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody Rapid test


Spezifikationen / Specifications:

Testprinzip:	chromatographischer Immunoassay
<i>Test principle:</i>	<i>chromatographic immunoassay</i>
Probentyp:	Kapillarblut aus der Fingerbeere (alternativ venöses Vollblut, Serum oder Plasma)
<i>Specimen type:</i>	<i>Capillary blood from the finger pads (alternative venous whole blood, serum or plasma)</i>
Probenvolumen / <i>Sample size:</i>	10 µl
Testzeit / <i>Testing time:</i>	15 Minuten / <i>minutes</i>
Umgebungstemperatur / <i>surrounding temperature:</i>	15-30°C
Lagertemperatur / <i>storage temperature:</i>	2-30°C
Packungsgröße / <i>Package size:</i>	40 Tests / <i>40 tests</i>


Durchführung des Tests / Test procedure

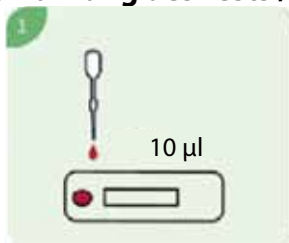

Tragen Sie 10 µL Vollblut auf /
Apply 10 µL whole blood

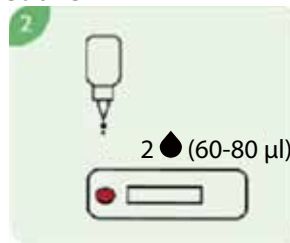

Tragen Sie 2 Tropfen (zwischen 60-80 µL) des Puffers auf /
Apply 2 drops (between 60-80 µL) of the buffer

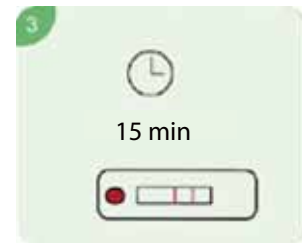

Lesen Sie das Testergebnis nach 15 Minuten ab. Nach 20 Minuten ist das Ergebnis **NICHT MEHR** gültig. / *Read the test result at 15 minutes. **Don't** read the result after 20 minutes.*

Interpretation der Ergebnisse / Interpretation of test results



Positiv / Positive

Negativ / Negative

Ungültig / Invalid

Klinische Performance / Clinical performance:

Clinical Performance of negative sample			
Negative Cases (By PCR&CT)	Negative coincidence rate (Wellion SARS-CoV-2 IgM)	Negative coincidence rate (Wellion SARS-CoV-2 IgG)	Negative coincidence rate (Total)
200	200 (100%)	200 (100%)	200 (100%)
Clinical Performance of positive sample (Symptoms appeared: 4-10 days)			
Positive Cases (By PCR&CT)	Positive coincidence rate (Wellion SARS-CoV-2 IgM)	Positive coincidence rate (Wellion SARS-CoV-2 IgG)	Positive coincidence rate (Total)
80	65 (81.3%)	30 (37.5%)	65 (81.3%)
Clinical Performance of positive sample (Symptoms appeared: 11-24 days)			
Positive Cases (By PCR&CT)	Positive coincidence rate (Wellion SARS-CoV-2 IgM)	Positive coincidence rate (Wellion SARS-CoV-2 IgG)	Positive coincidence rate (Total)
70	68 (97.1%)	67 (95.7%)	68 (97.1%)

	Inhalt / Content	Art.Nr. / Art. No.	PhzNr AT
Wellion SARS-CoV-2 IgM/IgG Antikörper Schnelltest <i>Wellion SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody Rapid test</i>	40 Stk / 40ct	VID35-08-011	5414479

wellion® THERMOMETER

INFRAROT STIRN- UND OHR-THERMOMETER
INFRARED FOREHEAD AND EAR THERMOMETER



KONTAKTLOSE MESSUNG
CONTACTLESS MEASUREMENT




1 SEKUNDE MESSDAUER
1 SECOND TESTING TIME




MESSBEREICH: 34,0°C BIS 43,0°C
MEASURING RANGE: 34,0°C - 43,0°C



2X AAA BATTERIEN
2X AAA BATTERIES

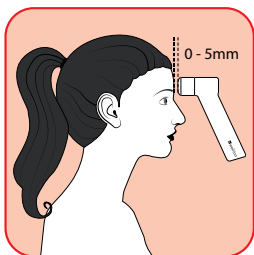

Stirntemperatur
Forehead temperature

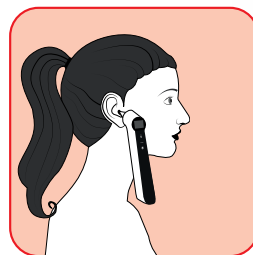

Ohrtemperatur
Ear temperature

	Inhalt / Content	Art.Nr. / Art. No.	PhzNr AT
Wellion Infrarot Stirn- und Ohr-Thermometer Wellion Infrared Forehead and Ear Thermometer	1 Stk / 1ct	WELL15-03	5174093




wellion® SAFETYLANCETS

Für eine sichere und sanfte Blutgewinnung

- Sterile Sicherheitslanzette
- Vorbeugung von Nadelstichverletzungen
- Entspricht Direktive EU 2010/32 §4, Art. 7 und TRBA250

For easy and gentle blood sampling

- Sterile safety lancet
- Prevention of needle stick injuries
- Complies with EU directive 2010/32 §4, Art. 7 and TRBA250

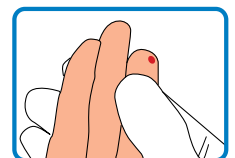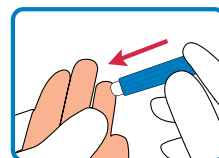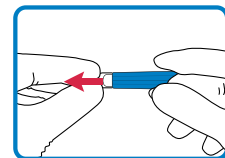

	Inhalt / Content	Art.Nr. / Art. No.	PhzNr AT
Wellion Safetylancets Sicherheitslanzetten 23G Wellion Safetylancets 23G	200 Stk / 200ct	WELL223	4041119